


INSTALLATION

GX-8



VISER

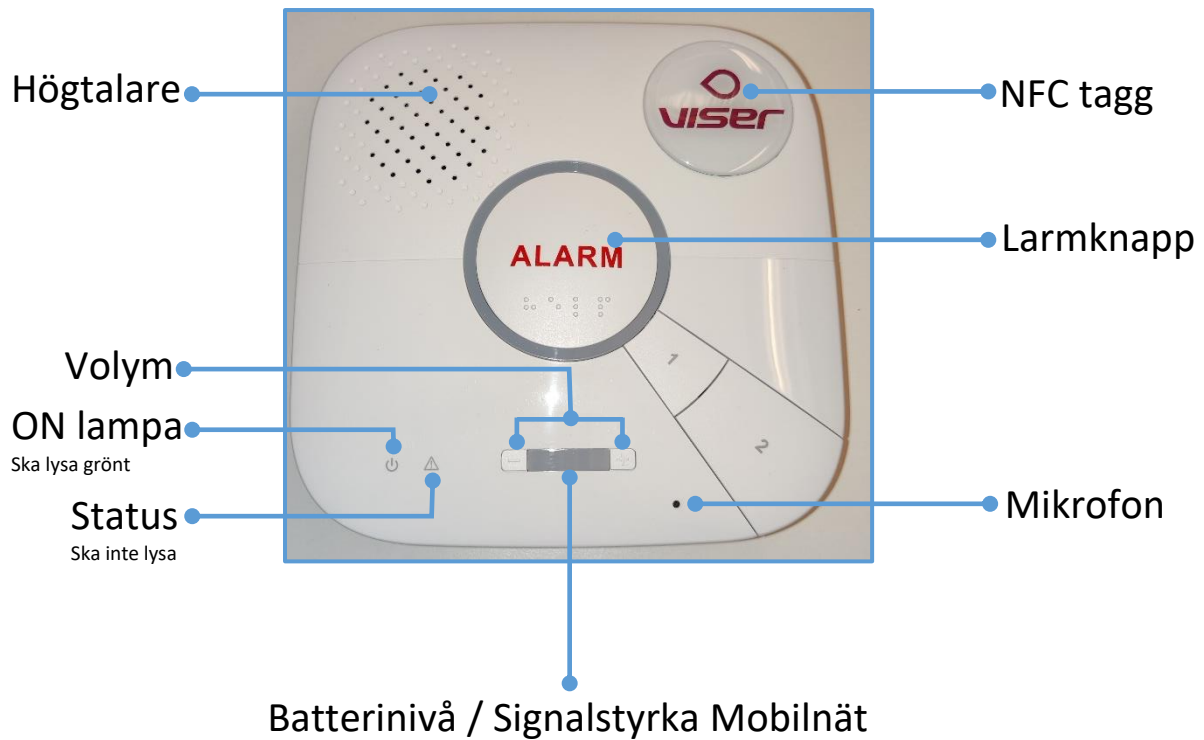

Installation av talenhet GX-8

1. Packa upp GX8 ur kartongen.
2. Sätt in strömkabeln i GX8 (nr 12) och vrid den 90 grader.
3. Sätt in stickkontakten i ett vägguttag.
4. Slå strömbrytaren på baksidan till "ON" se bild (nr 11) knappen mot strömkabel.
5. GX8 startar nu igång och den behöver ca 5 min att starta upp.
6. Indikator se bild (nr 5) lysas upp och indikerar signalstyrkan där 5 lampor är väldigt bra. Indikatorn är tänd i 5 min. Vid omstart aktiveras denna igen.

Inläring av trådlösa enheter

Alla klockor som ska registreras ska det aktiveras supervision på!


Håll in knappen på larmklockan i 15sek. När klockan blinkar 3ggr är den aktiv. Klockan kommer blinka vid 1 och 8 sek också

1. När GX8 är i normal läge, håll inne den VITA knappen på baksidan se bild (nr 16).
2. GX8 piper 1 gång när den VITA knappen trycks ner, håll den VITA knappen nertryckt tills GX8 piper 1 gång till vilket betyder att den står i inlärningsläge.
Bakgrundsbelysningen på den VITA ALARM knappen börjar att blinka lila.
3. Tryck in larmknappen på den trådlösa enheten som skall programmeras in.
GX8 piper för att visa att den trådlösa enheten har lästs in.
4. Ska du inte registrera fler enheter går du direkt till punkt nr 6
5. Tryck in larmknappen på den 2:a trådlösa enheten som skall programmeras in.
GX8 piper för att visa att den trådlösa enheten har lästs in.
6. När alla trådlösa enheter är inlästa, tryck på den VITA knappen på baksidan se bild (nr 16) och håll den nertryckt GX8 piper 1 ggr när den trycks ner och en gång efter 3 sek vilket visar att den nu står i normalläge. Den LILA inlärningslampan ska slockna (om man inte gör steg 6 kommer GX8 att automatiskt gå ur inlärningsläge efter 5 min av inaktivitet)


Test av GX-8

1. Tryck på den VITA ALARM knappen se bild (nr 1).
2. Kontrollera att larmet kommer upp i telefon och att det är rätt brukare.
3. Välj "JAG TAR DETTA LARM"
4. Tryck på telefonen vid Motringning
4. Kontrollera att samtalet går fram
6. Kvittera larmet.

Top View

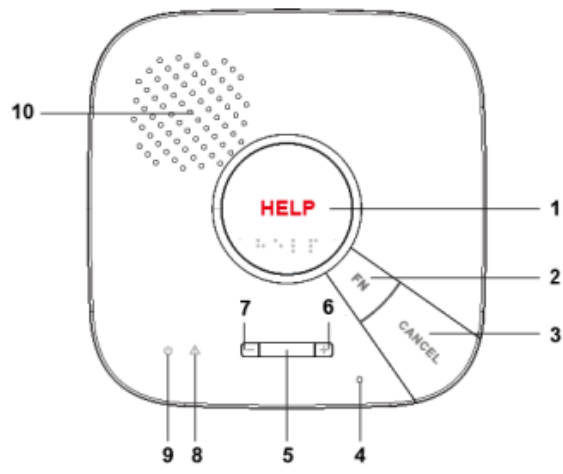

Back View

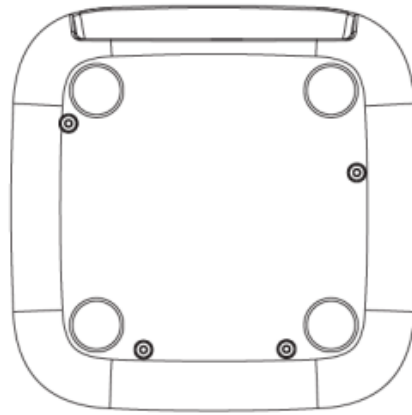

Side View

